

取扱説明書

モルタルミキサー 5L

(投入シュート)




株式会社 関西機器製作所

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南2丁目4番26号

TEL 06(6961)7637 FAX 06(6961)8062

1. 仕様概要

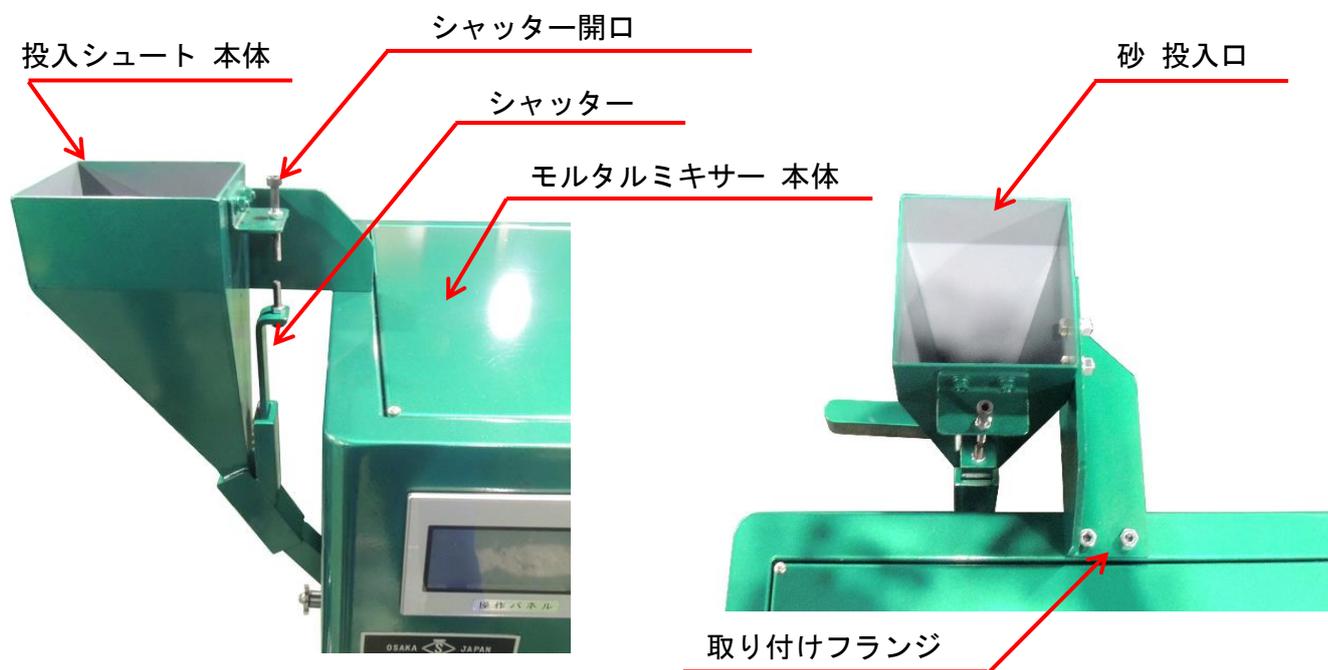

5L モルタルミキサー用の投入シュートはパドルを始動させて攪拌しながら、
規定量 $1350 \pm 5g$ の標準砂を 30 秒で投入するように開口部が調節してあります。


規定量の標準砂は JIS R 5201 で定められています。

<注意事項>


- ① 内部の砂を落とす際、シュートを叩いたり揺すったりすると、シュート及びミキサーの故障や練り混ぜ試験の結果に影響を及ぼす可能性があります。
- ② 位置決めボルト及びナットは動かさないでください。

2. 投入シュートの使用方法


① 投入シュートのシャッターを閉じてください。

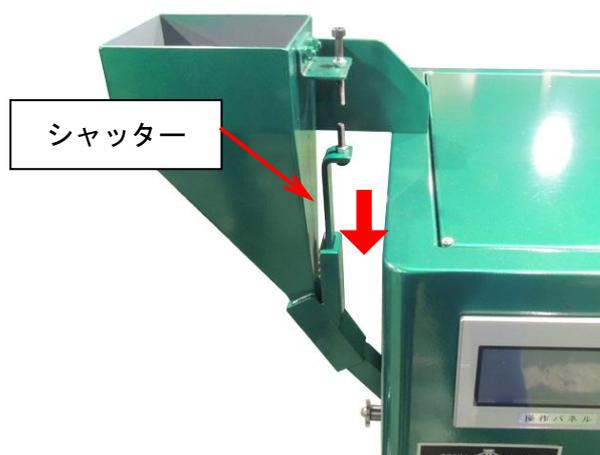

②シュート内に水漏れがないことを確認します。
試験目的に応じた量の細骨材を投入口に入れてください。

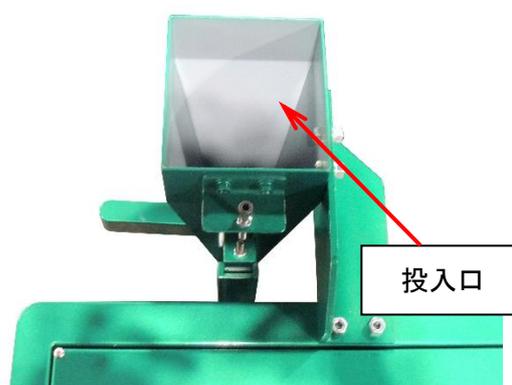

③規格に準じた時間で投入できるようにシャッターの開度を調整してください。

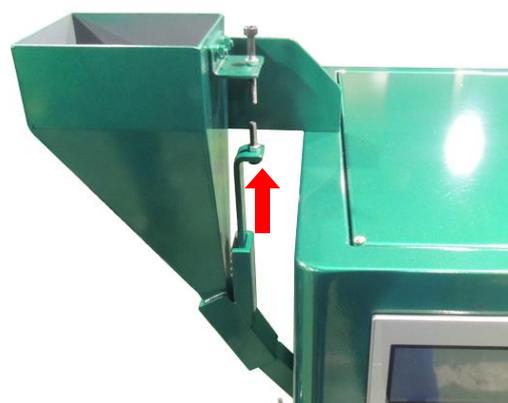

④シャッターの開度はスタッドボルトで固定できます。

